

ASTRIC DRY-BED



Enuresis Alarm

Congratulazioni per aver iniziato il tuo viaggio verso notti asciutte e GRAZIE per aver scelto Astric Dry-Bed.

Siamo qui per darti supporto fino ad arrivare alla tua cura completa e siamo disponibili per supporto via e-mail e telefonica. Per favore contattaci in caso tu abbia qualsiasi problema o desideri discutere di un qualche elemento del prodotto o del processo..

Dettagli Contatto:

Servizio Clienti: 01273 716516

Email: info@astricmedical.com

Sito Web: www.astricmedical.com

Indirizzo:

ASTRIC MEDICAL LTD

THE FORGE

81 HIGH STREET

WORTHING


BN11 1DN

1. COSA RICEVI NELLA CONFEZIONE	3
2. PRIMA DI INIZIARE	4
3. ALLESTIRE ASTRIC DRY-BED	5
4. TESTARE ASTRIC DRY-BED	6
5. FAR CONOSCERE A TUO FIGLIO ASTRIC DRY-BED	7
6. PREPARARE IL LETTO	9
7. PREPARARE TUO FIGLIO PER ANDARE A LETTO	10
8. FALSI ALLARMI E COME EVITARLI	11
9. COSA FARE QUANDO IL BAMBINO BAGNA IL LETTO	12
10. USARE IL GRAFICO PROGRESSI	13
11. LE FASI DI CURA DELL'ENURESI	14
12. CURA E MANUTENZIONE	15
<i>Changing The Batteries</i>	<i>16</i>
13. CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE	17
14. RISOLUZIONE PROBLEMI	18
<i>L'allarme non suona</i>	<i>18</i>
<i>Falsi Allarmi</i>	<i>18</i>
15. GARANZIA	19
16. SERVIZIO CLIENTI	20

1. COSA RICEVI NELLA CONFEZIONE

Dopo aver aperto Astric Dry-Bed troverai il seguente contenuto:

- **Un'Unità Allarme Astric Dry-Bed**
- **Un Pad di Rilevamento Astric Dry-Bed**
- **Un Grafico Progressi**
- **Un Manuale di Istruzioni Completo**
- **un Certificato di Garanzia Astric Medical 14 Giorni 'Niente Polemiche' Soddisfatti o Rimborsati**
- **2 x Batterie AAA**

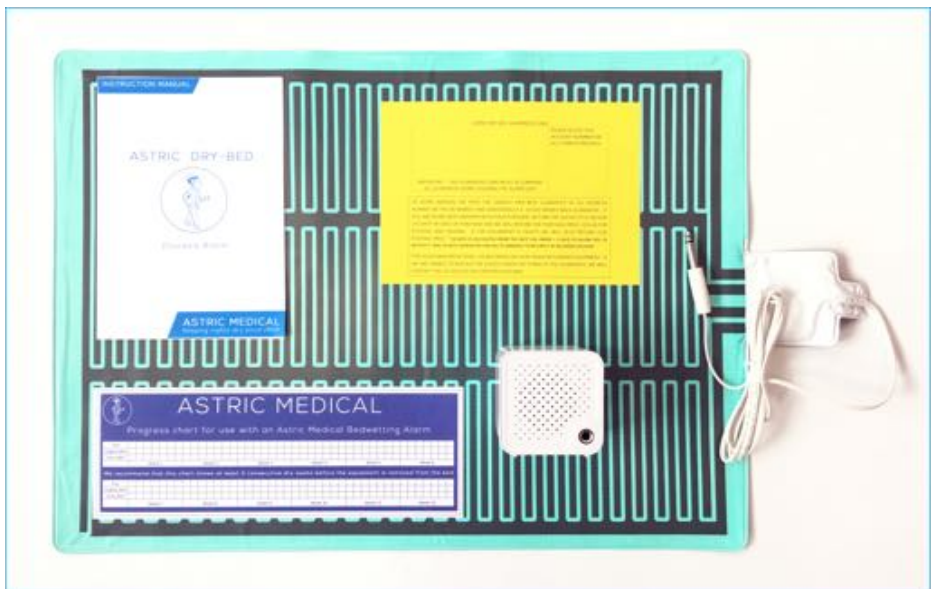

2. PRIMA DI INIZIARE

Noi siamo un'attività commerciale a conduzione familiare che nel corso di oltre 60 anni ha curato diverse migliaia di persone dall'enuresi notturna. Speriamo sinceramente che il tuo acquisto potrà portarti ad una guarigione completa. Questo manuale di istruzioni è progettato per assicurarti ottenere il meglio dei risultati da tuo Astric Dry-Bed.

Le tempistiche per un trattamento di successo variano a seconda dell'individuo, anche se bisogna sottolineare che abbiamo rilevato un tasso di cura del 90% entro 8 settimane.

Prima di iniziare ad utilizzare il dispositivo, ti raccomandiamo di leggere il manuale di istruzioni in pieno dato che leggere il manuale e seguire l'approccio raccomandato ti assicurerà di utilizzare Astric Dry-Bed per ottenere gli effetti ottimali.

L'Ellarme è stato progettato per svegliare il bambino quando bagnai letto. Mano a mano che prosegue l'uso di Astric Dry-Bed il bambino si allena a svegliarsi quando la vescica è piena. Questo allenamento crea la connessione permanente fra il cervello e la vescica che esiste nelle persone che non soffrono di enuresi notturna.

ALLESTIRE ASTRIC DRY-BED

3. ALLESTIRE ASTRIC DRY-BED

Posizionare le batterie AAA nell'Unità Allarme.

Collegare semplicemente il Pad Rilevatore all'Unità Allarme rende il sistema pronto per l'uso.



Acquisisci familiarità con le impostazioni di Dry-Bed.



Selezionare fra 3 settaggi di volume utilizzando il cursore volume. Raccomandiamo di scegliere il settaggio più alto.



È possibile inoltre scegliere fra 3 suoni diversi quando si usa il cursore suoni. Raccomandiamo inizialmente di scegliere l'opzione di mezzo.

4. TESTARE ASTRIC DRY-BED

Una volta preparato, Astric Dry-Bed può essere testato premendo una graffetta metallica sul circuito del Pad Rilevatore. Questo farà suonare l'allarme. Allarme suona poiché la pressione della graffetta sul Pad Rilevatore completa il circuito allo stesso modo in cui farebbe l'urina.



L'allarme può essere spento scollegando il Pad Rilevatore dall'Unità Allarme.

Nel caso in cui tu voglia testare Astric Dry-Bed, una graffetta è il metodo più raccomandato poiché il Pad Rilevatore in seguito non richieda pulizia. L'uso di un qualsiasi liquido durante il test richiederà in seguito la pulizia completa del Pad Rilevatore.

5. FAR CONOSCERE A TUO FIGLIO ASTRIC DRY-BED

È importante che tu abbia familiarità con il dispositivo e il processo di cura. Inoltre è importante fare pratica con tuo figlio su cosa fare quando scatta l'allarme. Questa pratica aiuterà a preparare il cervello di tuo figlio perché si svegli al suono dell'allarme.

Suggeriamo il seguente approccio:

- Spiega a tuo figlio in che modo funziona Astric Dry-Bed e qual è il processo da seguire per una cura completa.
- Simula il suono dell'allarme come segue:
 - Appoggia il Pad Rilevatore sul letto e posiziona l'Unità Allarme sul comodino del letto. Non coprire il Pad Rilevatore mentre fai pratica su come si usa il dispositivo. Nota – La sera è necessario seguire le istruzioni per preparare il letto correttamente. Fare riferimento alla sezione 'PREPARARE IL LETTO' di questo manuale.
 - Spiega a tuo figlio che il Pad Rilevatore sarà coperto la notte quando ci si sdraierà sopra.
 - Collega Astric Dry-Bed al Pad Rilevatore.
 - Spiega a tuo figlio che l'allarme suonerà quando bagna il letto e quando l'allarme suona, tuo figlio dovrà alzarsi e scollegare l'allarme.
 - Poi fai scattare l'allarme premendo una graffetta sul Pad Rilevatore.
 - Quando l'allarme suona, chiedi a tuo figlio di scollegare il Pad Rilevatore dall'Unità Allarme che blocca il suono.
 - Ora chiedi a tuo figlio di andare al bagno.
- Spiega a tuo figlio che quando suona l'allarme tu lo aiuterai a pulire il pad, risistemare il letto e prepararlo nuovamente per dormire.

FAR CONOSCERE A TUO FIGLIO ASTRIC DRY-BED

- Mostra a tuo figlio la tabella dei progressi e spiega come e quando sarà compilata. Raccomandiamo di introdurre un sistema di ricompense idoneo in modo che il bambino abbia il forte desiderio di restare asciutto e ricevere un premio adeguato.

6. PREPARARE IL LETTO

È importante ricordare che:

- Vuoi proteggere il materasso
- Vuoi evitare falsi allarmi
- Vuoi che tuo figlio sia il più comodo possibile
- Vuoi dare a tuo figlio le migliori possibilità di raggiungere una cura rapida

Il nostro approccio raccomandato è quello di preparare il letto come segue:

- materasso
- proteggi materasso
- lenzuolo inferiore
- Pad Rilevatore Astric
- asciugamano o cottonina a coprire il Pad Rilevatore. Se l'Asciugamano non è abbastanza lungo per infilarsi sui lati del letto, suggeriamo di piegare un lenzuolo facendone una striscia e posizionarla sull'asciugamano infilando il lenzuolo da ogni lato per assicurarsi che l'asciugamano rimanga al suo posto.
- Qui ci va il bambino!
- Coperta o piumino o lenzuolo superiore e coperte

Cerca di evitare che tuo figlio abbia troppo caldo la notte. Mentre tuo figlio attraversa il processo di allenamento suggeriamo che il bambino non indossi mutandine o pantaloni del pigiama alla sera. Il pad e l'unità sono progettati per essere abbastanza sensibili da reagire rapidamente all'urina. Se l'arrivo dell'urina sul pad è rallentato o dalle mutandine o dai pantaloni del pigiama questo potrebbe avere un effetto dannoso sul processo di cura.

7. PREPARARE TUO FIGLIO PER ANDARE A LETTO

NON dovresti limitare l'assunzione di fluidi di tuo figlio né durante la giornata né la sera prima di andare a letto.

Se tuo figlio ha sete dovrebbe poter bere. Il processo in oggetto per curare il bambino allena il suo cervello per dare la possibilità di controllare la vescica come se si trovasse durante la giornata e di svegliarsi la sera quando ha la vescica piena. Restringendo i liquidi, non consenti al corpo del bambino di reagire normalmente, cosa che può essere dannosa per il processo di cura.

Inoltre è importante NON svegliare il bambino quando vai a letto. Il processo che raccomandiamo allenerà il bambino a riconoscere quando la sua vescica è piena. Svegliando il bambino per andare al gabinetto risulti controproducente al processo di cura.

Per favore incoraggia tuo figlio ad andare al bagno prima di andare a letto.

8. FALSI ALLARMI E COME EVITARLI

Se il letto non viene preparato secondo l'approccio raccomandato, potrebbero verificarsi falsi allarmi.

I falsi allarmi possono verificarsi per 3 motivi:

1. Il Pad Rilevatore non è stato pulito adeguatamente e presenta residui di urina e/o sudore su di esso
2. sudore o altri fluidi hanno innescato l'allarme.
3. Il Pad Rilevatore è stato ripiegato su se stesso.

Le persone, inclusi i bambini, sudano durante la notte più di quanto ci si aspetta, ecco perché è importante avere un materiale idoneo fra il Pad Rilevatore e il bambino che dorme.

Abbiamo riscontrato che il modo migliore per interrompere i falsi allarmi dovuti al sudore è quello di coprire il Pad Rilevatore con una striscia di cottonina (o un asciugamano di dimensioni adeguate). È importante che la striscia di cottonina (o l'asciugamano) sia infilato sotto il materasso per assicurare che il Pad Rilevatore rimanga al suo posto e non si pieghi su se stesso. Se il bambino suda eccessivamente, può essere necessaria una seconda striscia di cottonina a coprire.

Un altro strato di cotone non è andato tanto che il cotone non assorbe sudore ma consente allo stesso di passare attraverso il lenzuolo e far scattare l'allarme.

9. COSA FARE QUANDO IL BAMBINO BAGNA IL LETTO

Quando tuo figlio bagna il letto, l'allarme scatta. Dato che tuo figlio conosce Astric Dry-Bed e il processo di cura in modo adeguato potrà spegnere l'allarme e andare al gabinetto. Se non lo fa, è importante che tu intervenga per assicurarti che tuo figlio spenga l'allarme e vada al gabinetto. Il bambino dovrebbe tentare di andare a gabinetto anche se ha fatto completamente la pipì nel letto.

Nota: se tuo figlio ha il sonno pesante e non si sveglia, è importante che tu svegli tuo figlio e gli chiedi spegnere l'allarme. Se segui questo processo, tuo figlio inizierà a svegliarsi quando suona l'allarme.

Cambia lenzuola e indumenti sporchi e assicurati che il Pad Rilevatore venga pulito adeguatamente e asciugato utilizzando il metodo illustrato nella sezione 'Pulire il Pad Rilevatore'.

Fai nuovamente il letto e chiedi a tuo figlio di riconnettere il Pad Rilevatore all'Unità Allarme.

È importante che tuo figlio sia completamente sveglio in modo da ricordarsi di aver udito l'allarme e di essere stato al bagno prima che si svegli la mattina.

Se il bambino continua a resistere a svegliarsi la notte quando suona l'allarme, dovresti considerare di dormire temporaneamente nella stessa stanza di tuo figlio, in modo da poterlo aiutare durante il processo di cura.

10. USARE IL GRAFICO PROGRESSI

Ogni mattina tu e tuo figlio dovrete completare il grafico progressi assieme, registrando se la notte è stata asciutta, leggermente bagnata o molto bagnata.

Alla fine di ogni due settimane dovrete completare la tabella sommario sul retro del grafico progressi.

Dopo 4 settimane di utilizzo, confrontate le righe A e B per vedere i progressi e tenere traccia guardando se il numero di notti asciutte è aumentato o il numero di notti leggermente bagnate o molto bagnate è diminuito. Se si registra un miglioramento, per quanto piccolo, continuate con il trattamento. Ricordate che il tempo medio di cura è di 8 settimane.

Dopo 8 settimane di trattamento confrontate le righe C e D. Se non è stata raggiunta la cura totale ma ci sono stati ulteriori miglioramenti, continuate il trattamento dato che ciò probabilmente porterà alla cura completa.

Raccomandiamo un minimo di almeno 3 settimane asciutte consecutive prima di rimuovere completamente l'attrezzatura.

11. LE FASI DI CURA DELL'ENURESI

Ci sono 3 fasi dell'enuresi e ci aspettiamo che tuo figlio attraversi queste fasi durante il processo di cura. Le fasi sono:

- Molto Bagnato – Quando tuo figlio fa la pipì completa nel letto.
- Leggermente Bagnato – Quando tuo figlio si sveglia nel mezzo della pipì e smette di farla o ne fa una molto piccola. Tuo figlio in questa fase completerà la pipì al bagno.
- Asciutto – Il bambino sarà completamente asciutto durante questa fase e quando rimane asciutto con consistenza potrà svegliarsi e andare al bagno per conto suo quando la vescica piena.

Bisogna notare che una volta curati, circa 1 bambini su 5 soffrono un periodo di regressione. Questo non dovrebbe preoccuparti. Nel caso questo accada allora inizia nuovamente ad usare Astric Dry-Bed. I nostri dati mostrano che il recupero completo per i bambini che provano una regressione normalmente è molto più rapido.

12. CURA E MANUTENZIONE

Pulire il Pad Rilevatore

È molto importante che il processo di pulizia venga seguito ogni volta che l'urina entra in contatto con il Pad Rilevatore per 2 motivi:

1. Anche un piccolo residuo di urina (impercettibile ad occhio nudo) è abbastanza per far scattare l'allarme.
2. L'urina contiene acido. L'acido che non viene pulito andrà a degradare il Pad Rilevatore.

Il metodo di pulizia raccomandato per il Pad Rilevatore è quello di mettere il pad sotto acqua corrente tiepida e asciugare con un panno asciutto.

È importante:

- NON usare fluidi detergenti casalinghi
- NON usare nessun tipo di salvietta
- NON usare salviette per bambini
- NON usare spray a base alcolica

Gli elementi sopra contengono agenti chimici che possono danneggiare la superficie del pad e accorciarne il ciclo vitale

- NON mettere il pad in lavatrice
- EVITARE di bagnare la spina o il punto in cui i cavi si connettono al pad

Una volta pulito il Pad Rilevatore:

- Asciugare attentamente il pad

- raccomandiamo di tenere un rotolo di carta assorbente dove prevedete di pulire il pad, dato che questo serve per rimettere in modo rapido e semplice il pad in condizioni di usabilità.
- Assicurarsi che il pad sia completamente asciutto prima di risistemarlo sul letto per riutilizzarlo.

Alcuni genitori scelgono di acquistare un secondo pad in modo che ce ne sia istantaneamente uno pulito e asciutto pronto all'uso nel bel mezzo della notte. Anche se si alternano i pad in questo modo, raccomandiamo di seguire il processo di pulizia una volta che il bambino bagna il letto, anche se si lascia asciugare il pad appeso.

Anche in caso di notti asciutte raccomandiamo di pulire e asciugare il Pad di Rilevamento ogni giorno. Il sudore accumulato, se non rimosso ogni giorno, può comunque portare a falsi allarmi. Dato che il sudore è inodore, vale la pena ricordare che anche se non si vede, non significa che non sia lì!

Changing The Batteries

Astric Dry-Bed richiede pochissima alimentazione e le batterie dureranno molto a lungo. Al momento di sostituire le batterie, rimuovere il copri batteria dal fondo dell'Unità Allarme e sostituire le batterie.

Le batterie vanno nello stesso verso con il terminale negativo della batteria allineato alla molla.



13. CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE

Una volta che tuo figlio è progredito al punto da sembrare di essere guarito e vuoi riporre l'unità e il pad in sicurezza, per favore segui questi passi:

- Assicurati che il Pad Rilevatore sia completamente pulito e asciutto
- Conserva il Pad Rilevatore nella borsa originale in polietilene e tienilo piatto.
- Rimuovi le batterie dall'Unità Allarme

14. RISOLUZIONE PROBLEMI

L'allarme non suona

Nel caso in cui l'Unità Allarme non suona quando tuo figlio bagna il letto controlla le seguenti voci:

- Assicurati che il Pad Rilevatore sia connesso all'Unità Allarme.
- Testa Astric Dry-Bed connettendo Unità Allarme e Pad Rilevatore e premendo una graffetta sul circuito vicino al terminale dove si trova il cavo secondo la sezione 4 'TESTARE ASTRIC DRY-BED'.
- Se l'allarme non è scattato, sostituisci le batterie.
- Se l'allarme è scattato, azzerà l'allarme e usa la graffetta per testare ulteriormente il Pad Rilevatore. È disponibile un processo di test completo all'interno della sezione 'Video Guide' del nostro sito web.
- Se vedi che un'area del Pad Rilevatore non funziona e il tuo Pad Rilevatore è ancora in garanzia, per favore contattaci per una sostituzione. Nota: dovrai restituirci il tuo Pad Rilevatore per ricevere un prodotto sostitutivo.
- Nel caso in cui nessuno dei passi sopra faccia scattare l'allarme, per favore contatta la hotline del nostro servizio clienti.

Falsi Allarmi

Se ricevi dei falsi allarmi, per favore consulta la sezione 8 del manuale di istruzioni 'FALSİ ALLARMI E COME EVITARLI'.

Si prepara il letto correttamente e provi comunque falsi allarmi, per favore contatta la hotline del nostro servizio clienti.

15. GARANZIA

- L'Unità Allarma Astric Dry-Bed ha una garanzia di 1 anno nel rispetto di difetti di produzione e manifattura e rottura o malfunzionamento in normali condizioni di utilizzo.
- Il Pad Rilevatore Astric è completo di garanzia di 3 mesi nel rispetto di difetti di produzione e manifattura e rottura o malfunzionamento in normali condizioni di utilizzo.
- La garanzia non copre abuso o uso improprio.
- La garanzia non è trasferibile.
- È richiesta prova di acquisto con data di acquisto per avere diritto ad una sostituzione entro i termini della garanzia.
- I costi di spedizione e imballaggio sostenuti dal cliente non sono rimborsabili.
- Astric Medical si riserva il diritto di modificare le specifiche e a garanzia senza preavviso.

16. SERVIZIO CLIENTI

Il nostro sito web presenta diversi video progettati per mostrarti come usare Astric Dry-Bed.

Anche il nostro team di servizio clienti è a disposizione per fornire ogni tipo di supporto prodotto richiesto durante il processo di cura. Puoi contattare il team supporto clienti telefonicamente, per email o lettera:

Dettagli Contatto:

Servizio Clienti: 01273 716516

Email: info@astricmedical.com

Sito Web: www.astricmedical.com

Indirizzo:

ASTRIC MEDICAL LTD

THE FORGE

81 HIGH STREET

WORTHING

BN11 1DN

Siamo sempre interessati a sentire dei progressi fatti da te e dal tuo bambino.

Ti preghiamo di restituirci il grafico progressi in modo da poterlo aggiungere al nostro archivio di risposte.

Grazie per aver scelto Astric Dry-Bed.

Indirizzo:

ASTRIC MEDICAL LTD

THE FORGE

81 HIGH STREET

WORTHING

BN11 1DN

ASTRIC MEDICAL



www.asticmedical.com

ASTRIC MEDICAL
Keeping nights dry since 1956